

Om journalen inte kommit in i CWS:en Ambulansverksamheten

Gäller för: Ambulansverksamhet

Utförs på: Ambulansverksamhet

Om journalen inte kommit in i CWS:en eller är ofullständig pga. kommunikationsproblem, följ nedanstående instruktion.


Om du fortfarande inte har nät (KronNet överstruken), gör följande:

Sätt in nätverkskabeln direkt i mobimedien. Kontakten sitter under den 5:e gummiluckan på vänster sida.

På CLV ligger kabeln (med denna instruktion i slussen), På LL ligger motsvarande i medicinförrådet i ambulanshallen.

Om du däremot har kommit i nät (KronNet i höger hörn ej överstruken) kan du göra detta i bilen.

Klicka på ”Kontrollpanelen”.

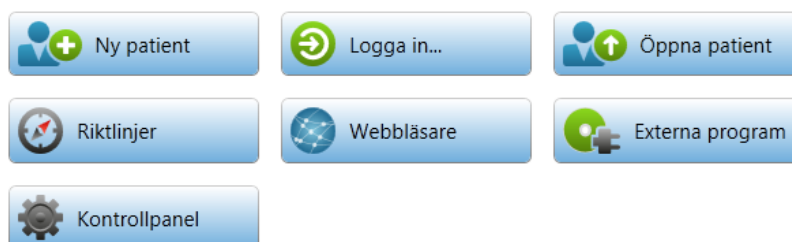

Klicka på ”Sync”

Giltig fr.o.m: 2018-05-01

Giltig t.o.m: 2020-03-15

Identifierare: 45079

Om journalen inte kommit in i CWS:en Ambulansverksamheten



Inställningar

Inställningar Optioner Radio-nummer 123 Flygläge

Status

Sync Nätverk Batteri Plugins

Logg

Logg Fjärruppdatering KeepIpUp Service

Avsluta **Testpatient**

Avsluta Starta om Stäng av Starta testpatient

Stäng

Klicka på aktuell rad. Observera valen ”Dagar bakåt” och ”Visa endast pågående”.

Visa

Dagar bakåt: 14 Visa endast pågående

Status	ID:	Datum	Köad	Mottagare
	testsson test 19121212-1	2014-05-16 12:26:34	Skickas...	KronNet

Stäng

Nedanstående dialogruta visas. Klicka på ”Sänd om”

Patient testsson test 19121212-1212

Skicka till ny mottagare

Vald mottagare: KronNet

Journal:

Meddelanden:

Vågform:

Trender:

Komplex:

Event:

Slag:

Pace:

När det hela är klart har pelarna gått hela vägen. Observera att fler pelare också ska gå hela vägen om patienten är monitorerad.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela faktaägare